

## Beschreibung

Starre, retentive, zylindrische Verankerung mit Ringfeder zum Auswechseln

## Indikation




Abnehmbare, starr verankerte Teil- und Hybridprothesen auf Wurzelkappen

## Werkstoff

**Au-Ag**  
nicht angiesbare Edelmetall-Legierung mit hoher Abriebresistenz, zum Auflöten. Muss unbedingt ausgehärtet werden (500°C / 30 min)  
**Titan**  
Titanlegierung Grad 5  
**Stahl**  
Spezialfederstahl


## Kontraindikation

Unilaterale Freiidprothesen ohne Transversalverblockung. Totalprothesen mit nur einer Verankerung, oder nur zwei Verankerungen z. B. auf 13 und 23

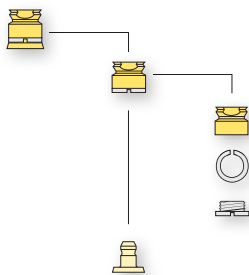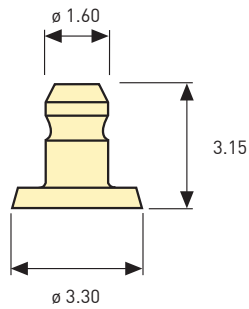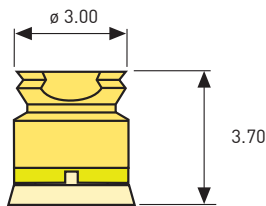

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Spezifisches
2010762	Verankerung komplett	Titan / Au-Ag	
2010772	Matrize komplett	Titan	keine thermische Behandlung
2010782	Matrize leer	Titan	keine thermische Behandlung
2010741	Ringfeder standard	Stahl	
2010752	Gewinding	Titan	
2010711	Patrize	Au-Ag	zum Anlöten, unbedingt aushärten
2010791	Ringfeder stark	Stahl	

## Hilfsinstrumente

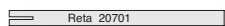

Best.-Nr.	Bezeichnung	
2020701	Parallelhalter	für Matrizen
2020711	Modellachse	

## Wichtig:

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung

Bitte beachten Sie „Wichtige Hinweise für die Verwendung und Verarbeitung von Attachments“

Informationen unter: [www.unor.ch](http://www.unor.ch), oder bei Kaladent AG, Unor Labor-Service, Steinackerstrasse 47, CH-8902 Urdorf

2016.12.12